



ISO 9001:2000 JAS-ANZ VNZ



ISO 13485



- **VAKUMLU CERRAHİ POZİSYON YATAĞI VE YASTIĞI.**
- **VACUUMED SURGICAL POSITIONING MATTRESS&CUSHION**


#### ARGIFORM Vakumlu Cerrahi Pozisyon Yatağı Ve Yastığı

- "Güvenli kullanım" sistemiyle vakumlayarak sabitleme özelliği cerraha operasyon yapacağı alana optimum giriş imkanı sağlar.
- Hastanın pozisyonu çok kısa sürede ve güvenli bir biçimde sağlanır.
  - Ameliyat masasının aşırı eğimlendirilmesi halinde ArgiForm'un yüzey basınç dağılımı ve hastanın pozisyonu bozulmaz.
  - Hastanın pozisyonu değiştirilmek istendiğinde kolayca ve çok kısa sürede uygulama yapılabilir.
  - Hastanın pozisyonu bozulmadan klinikler arası transfer yapılabilir
  - Güvenli sabitleme imkanı sağlar.
  - Aşırı eğimlendirme toleransı vardır.
  - Çabuk ve kolay kullanıma uygundur.

#### ARGIFORM Vacuumed Surgical Positioning Mattress & Cushion

Its fixation feature enables optimum admission to surgeon for surgical operation area by vacuuming its "Safe Application" System.

- Patient position is provided reliably and in a short period.
- Excessive grading of operation table does not impair ArgiForm's area pressure distribution and the patient position.
- When it is desired to change patient position, the application can be made easily and in a short time.
- The patient can be transferred between clinics without changing the position of patient.
- Safe Fixation
- Excessive Grading Tolerance
- Fast and Easy Application

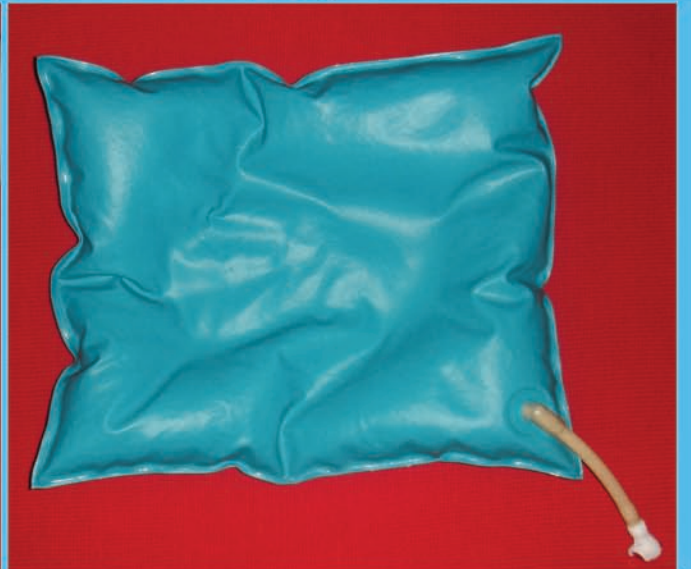

- ArgiForm Vakumlu Cerrahi pozisyon yatağı ve yastığı, **Argi Group** üretimidir.

## ArgiForm Vakumlu Cerrahi Pozisyon Yatağı ve Yastığı:

- Argiform,uzun süren laboratuvar ve deneysel çalışmalarla birlikte yapılan araştırma ve geliştirme neticesinde; fizyoterapist,dermatolog, cerrahlar ve anatomi uzmanlarının teknolojik ve bilimsel bir çalışma sonucunda oluşturduğu bir üründür.
- Argiform, içerisinde bulunan milyonlarca özel polistren tanecik sayesinde cilt ve dokular için gerekli olan stabilizasyonu,ısı muhafazasını ve mikro-sirkülasyonu sağlar.
- Argiform, hasta vücudunun temas basıncını minimuma indirger ve bu basıncın vücudun her noktasına eşit şekilde dağılmasını sağlar.
- Argiform, hastanın vücuduna birebir ve ergonomik şekilde uyum sağlar ve vücut ısısını muhafaza eder.
- Argiform , deformasyon önleyici özelliğe sahip olup , tüm cerrahi pozisyonlarda ameliyat sonrası ve uzun süreli pozisyon kullanımlarını kusursuz bir biçimde karşılayarak komplikasyon riskini ortadan kaldırır.
- Argiform, doktor, hasta ve ameliyat ekibine konfor güvenlik ve zaman kazandırır.  
Maksimum sabitleme rahatlığı sağlar.  
Dekübit cilt ülserasyonunu önler.  
Vücut ısısını korur.  
Komplikasyonları engeller.  
Hasta ve kullanıcı konforunu sağlar.

## ArgiForm Nasıl Çalışır?

ArgiForm cerrahi pozisyon yatakları 3 boyutlu özel PVC'den ve özel mikro granüllerden, kaymayı engelleyecek şekilde tasarlanarak tıbbın ve sağlık sektörünün hizmetine sunulmuştur. Vücudun her uzvu için ayrı ayrı şekil alabilme ve aynı basınç özelliği, vakumlandırıldıklarında ve takım halinde uyum sağlayarak stabilize olan polistrenden üretilen ürün, özel granüller sayesinde başarılı bir biçimde pozisyonlandırma ve ısıyı muhafaza etme görevini yapar. ArgiForm latex içermediği gibi X-RAY ışınlarını geçirme özelliği ile CT ve MR çekimleri için idealdir.

## ArgiForm Kullanımı:

- ArgiForm ameliyat masası üzerine serilir
- İstenildiği takdirde üzerine steril drep veya steril yeşil örtü serilebilir.
- İsteğe bağlı olarak sıvı dezenfektan ile silinebilir.
- Hastaya ArgiForm üzerinde istenilen pozisyon verilir.
- ArgiForm hastanın pozisyonuna göre kalıplandırılır
- ArgiForm hortumu merkezi vakum sistemine veya vakum pompasına bağlanır -Valf açık konumda tutulur. Bu şekilde hastanın pozisyon stabilitesi sağlanmış olur.
- Valf kapalı pozisyona getirilir
- Hastanın pozisyonu değiştirilmek istendiğinde veya ameliyat bittiğinde vakum anahtarı yeniden açılarak serbest form şekline getirilir.  
Latex İçermez  
CT ve MR çekimlerine uygundur  
Geniş ürün seçenekleri vardır.

## ArgiForm Vakumlu Yatak Seçimi

ArgiForm hastanın özel olarak pozisyonlandırılması için gerekli olan tüm cerrahi prosedürleri karşılamaktadır.Her tür cerrahi girişim pozisyonu için mutlaka bir ArgiForm çeşidi vardır. İstendiği takdirde özel ebatlarda üretim yapılabilmektedir. Yan alanda yatak ürünlerinden örnekleri ve ölçülerini görebilir ve isteyebilirsiniz.

- Yan Pozisyon
- Yarı-Yan Pozisyon
- Arka Pozisyon
- Oturma-Yarı Oturma Pozisyonu
- Büklüm Pozisyon
- Lithotomy Pozisyonu
- Laparascopi Pozisyonu
- Her klinik için uygun Argiform seçeneği
- Kişisel ihtiyaçlara uygun ürün çeşidi

## ArgiForm Vakumlu Ameliyat Yastığı

Cerrahi pozisyon yatağının tüm avantajlarını taşımaktadır, sadece baş bölgesi pozisyonları için özel olarak tasarlanmıştır. Baş ya da boyun bölgesi pozisyonları sabitleme için idealdir

## ArgiForm Pompa

Vakum sistemi bulunmayan hastanelerde giriş kısmına uygun bir pompa yardımı ile vakum yapılabilir

## ArgiForm Vacumed Surgical Position Mattress and Cushion:

- Argiform is a product created by technological and scientific studies of physiotherapists, dermatologists, surgeons and anatomy experts as a result of laboratorial and experimental studies for a long period as well as research and development performed.
- Argiform provides stabilization, temperature maintenance and micro-circulation required by skin and tissues by means of millions of special polystyrene particles inside.
- Argiform minimizes contact pressure of patient body and provides this pressure to be distributed equally to the all spots of body.
- Argiform accords with the body of patient ergonomically and preserves body temperature.
- Argiform removes complication risk by meeting postoperative and long-period position comfort utilizations in all surgical positions and it prevents deformatio.
- Argiform makes doctor, patient and operation team to gain safety and time.  
It provides Maximum Fixation comfort.  
It prevents decubitus skin ulceration.  
It preserves body temperature.  
It prevents complications.  
It provides patient and user comfort.

## How ArgiForm Works?

ArgiForm surgical position mattresses are formed of 3 dimensioned special PVC and special micro granules and presented for the service of medicine and health sector by being designed as preventing to slip. By the quality of same pressure and of taking the shape of each part of body individually and by having special Polystyren granules which are stabilized together when vacuumed, it performs its positioning and temperature preservation duties successfully. ArgiForm does not contain latex and it is ideal for having CT and MR since it transmits X-RAY.

## Using ArgiForm:

- ArgiForm is spread over operation table.
- When desired, sterile drape or sterile green cover can be spread over.
- Optionally, it is cleaned with disinfectant.
- Desired position is given to patient on ArgiForm.
- ArgiForm is shaped as to the position of patient.
- ArgiForm hose is connected to central vacuum system or vacuum pump. The valve is kept open.
- The stability of patient position is provided now.
- The valve is brought to OFF position.
- When it is desired to change the position of patient or when the operation is finished, vacuum switch is opened again to give it free form. It does not include latex.  
It is suitable for having CT and MR.  
It has extensive product options.

## ArgiForm Vacumed Mattress

ArgiForm meets all surgical procedures required for positioning patient distinctively. There is always an ArgiForm variety for all kinds of surgical position. When desired, special size manufacturing can be done. You can see samples and their sizes on the side page.

- Side Position
- Half-Side Position
- Back Position
- Sitting-Half Sitting Position
- Bend Position
- Lithotomy Position
- Laparoscopic Position


- Argiform option appropriate for all clinics
- Product variety appropriate for personal requirements

## ArgiForm Vacumed Operation Cushion


It has the all advantages of Surgical Position Mattress; it is just designed for head area positions. It is ideal for fixation of Head or Neck area positions.

## ArgiForm Pump


In hospitals not having vacuum systems, vacuum can be made to the admission area by means of an appropriate pump.

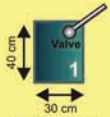


Argi Form  
Surgical Cushion  
Cerrahi Yastık  
30 cm x 40 cm  
ARCC015034

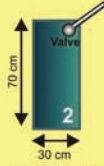


Argi Form  
Surgical Cushion  
Cerrahi Yastık  
30 cm x 70 cm  
ARCC015037

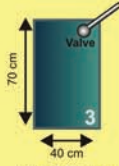


Argi Form  
Surgical Cushion  
Cerrahi Yastık  
40 cm x 70 cm  
ARCC015047

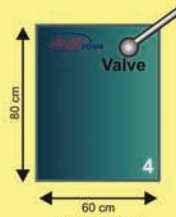


Argi Form  
Surgical Mattress  
Cerrahi Yatak  
60 cm x 80 cm  
ARCC015068

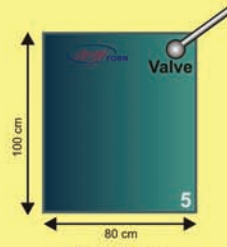


Argi Form  
Short Surgical Mattress  
Gynecology Pediatrics  
Kısa Cerrahi Yatak  
Jinekoloji Pediatri  
80 cm x 100 cm  
ARMJ015081

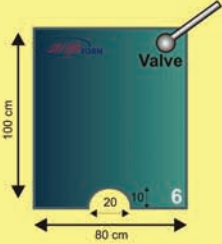


Argi Form  
Short Cavernous  
Surgical Mattress  
Gynecology Urology  
Kısa Oyuklu Cerrahi Yatak  
Jinekoloji Üroloji  
80 cm x 100 cm  
ARMU015081

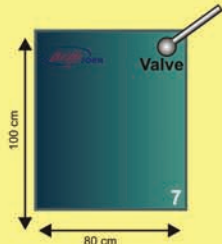


Argi Form  
Short Surgical Mattress  
Upper Body Operation  
Kısa Cerrahi Yatak  
Vücut Üst Kısım Opr.  
80 cm x 100 cm  
ARMV015081

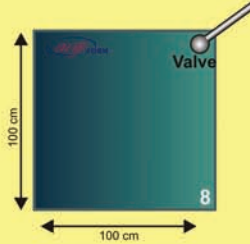

Argi Form  
Short Surgical Mattress  
Upper Body Operation  
Kısa Cerrahi Yatak  
Vücut Üst Kısım Opr.  
100 cm x 100 cm  
ARMV015011

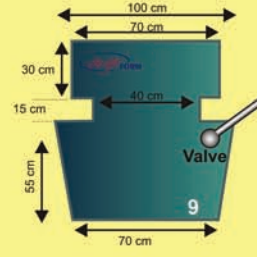


Argi Form  
Custom Formed Surgical Mattress  
Side Positioned Hip Operation  
Özel Şekilli Cerrahi Yatak  
Yan Pozisyonlu Kalça Opr.  
100 cm / 70 cm x 100 cm  
ARMK015011

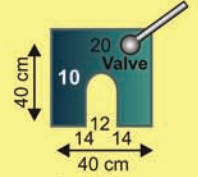


Argi Form  
Surgical Neck Cushion  
Cerrahi Boyun Yastığı  
40 cm x 40 cm  
ARCB015044




Argi Form  
Universal Surgical Mattress  
Universal  
Cerrahi Yatak  
100 cm x 200 cm  
ARMU015012

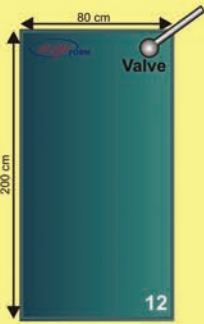


Argi Form  
Universal Surgical Mattress  
Universal  
Cerrahi Yatak  
80 cm x 200 cm  
ARMU015082

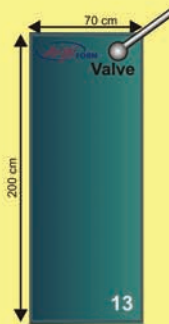


Argi Form  
Universal Surgical Mattress  
Universal  
Cerrahi Yatak  
70 cm x 200 cm  
ARMU015072

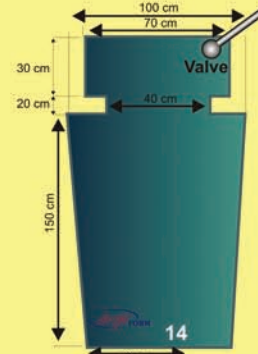


Argi Form  
Custom Formed Surgical Mattress  
Side Position  
Özel Şekilli Cerrahi Yatak  
Yan Pozisyon  
100 cm / 70 cm x 200 cm  
ARMY015012

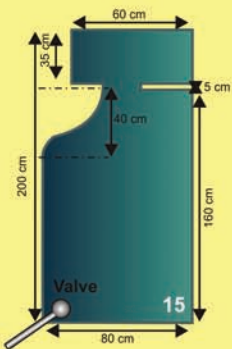


Argi Form  
Custom Formed  
Surgical Mattress  
For Shoulder Operation  
Özel Şekilli Cerrahi Yatak  
Omuz Operasyonu için  
80 cm x 200 cm  
ARMS015082

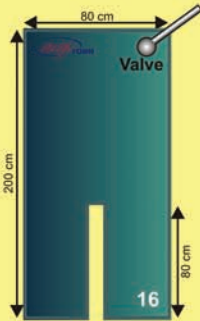

Argi Form  
Custom Formed  
Surgical Mattress  
For Leg and Foot Operation  
Özel Şekilli Cerrahi Yatak  
Bacak ve Ayak operasyonu için  
80 cm x 200 cm  
ARMA015082

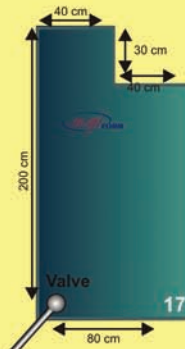

Argi Form  
Surgical Mattress  
For Shoulder Operation  
Cerrahi Yatak  
Omuz Operasyonu için  
80 cm x 200 cm  
ARMO015082  
30 cm x 40 cm  
ilave yastıklı  
ARCC015034

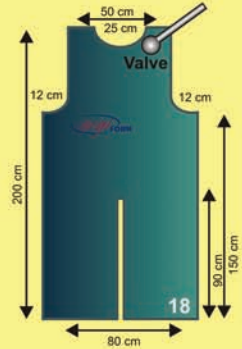

Argi Form  
Custom Formed  
Surgical Mattress  
With Leg and Neck Cavity  
Özel Şekilli Cerrahi Yatak  
Bacak ve Boyun oluklu  
80 cm x 200 cm  
ARMB015082

## Dekübit Nedir?

Dekübit cilt ve cilt altındaki dokuya uzun süreli basıncın sebep olduğu bir hasar formudur. Yapılan bilimsel çalışmalarda artan basınç altında 10- 20 dk sonra dekübit riskinin ortaya çıktığı kanıtlanmıştır. Hasta için bunun anlamı ağrı tecrit ve yaşam kalitesinin düşmesidir.

## Ameliyat Masasında Pozisyonlandırma ve Dekübit

Özellikle cerrahi işlemler sırasında Akut Dekübit cilt ülserasyonu, paraliz ve yatak ağrısı riskleri oluşmaktadır. Pozisyon gerektiren tüm uzun süreli cerrahi işlemlerde bu risk daha fazladır.

## Ameliyat Masasında Emniyet ve Konfor

Ameliyat esnasında, Argi Form ile hastaya verilen Pozisyon sayesinde hastanın ve doktorun emniyet ve konforunu sağlamış olur. Argi Form güvenli bir şekilde cerrahi müdahalenin sonuçlanmasına ve riskleri azaltılmasına yardımcı olur.

## What is Decubitus?


Decubitus is a damage form caused by a longtime pressure onto skin and tissues under skin. It is proved in scientific studies that decubitus risk appears after 10-20 minutes under increasing pressure. It means pain, insulation and decrease of life quality for patient.

## Positioning on Operation Table and Decubitus


Especially during surgical processes, Acute Decubitus skin ulceration, paresis and bed pain risks appear. This risk is high on all longtime surgical processes requiring position.

## Safety and Comfort on Operation Table



During operation, safety and comfort of patient and doctor are provided by means of Position given to patient by Argi Form. Argi Form reliably helps resulting surgical interventions and decreasing risks.

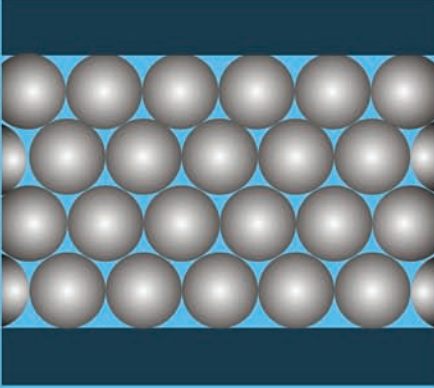

Vakumsuz  
not vacuumed

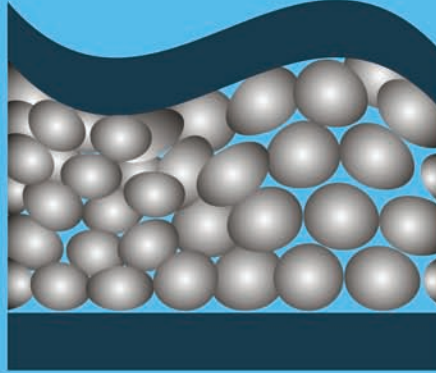

Vakumlu  
vacuumed

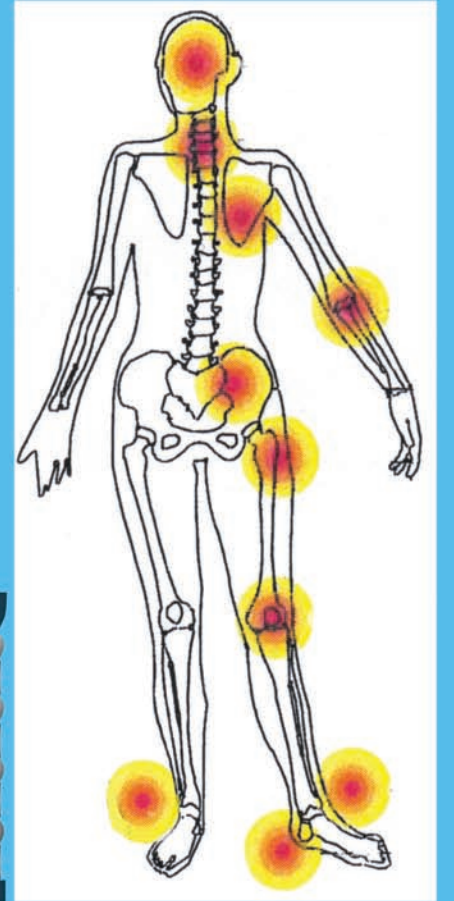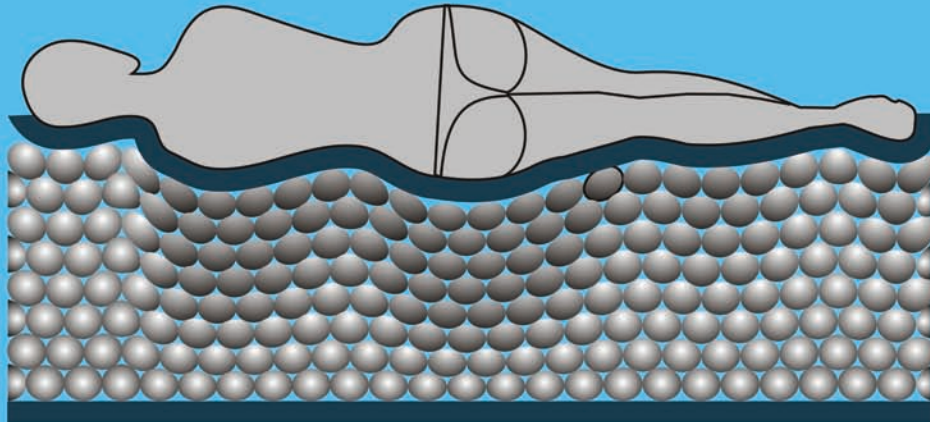

## Üretici Manufacturer

**argi** GROUP

Sağlık-1Sk. Çakırgil Apt. 7/8 06420-07 Yenışehir/ANKARA - TURKEY  
Tel : +90 312 430 65 18 -19 Fax : +90 312 430 41 04  
e-mail : info@argigrup.com • Web : www.argigrup.com